

NuStep[®] RB8

Trainingsfiets

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Inhoud

Inleiding	4
Veiligheidsinstructies	5-6
Installatie en opstelling	7
Gebruik van de wisselstroomadapter	8
Overzicht van de functies van de RB8	9
Juiste oefenposities	10
Aanpassingen aanbrengen	10-11
Beeldschermen	12-17
Pauzefunctie	18
Systeeminstellingen	19-21
Gebruikersinstellingen	21
Gegevens uit een gebruikersprofiel exporteren	22
Trainingssamenvatting exporteren	23
Preventief onderhoud	24
Garantie van de RB8	24
Informatie over serienummer van de RB8	25
Klantenservice	26
Technische gegevens	27
Conformiteitsverklaring van Amerikaanse communicatiecommissie (FCC)	28

Inleiding

Bedankt voor de aankoop van de NuStep RB8-trainingsfiets. We waarderen u als klant en uw vertrouwen in onze producten.

Ons assortiment trainingsfietsen, bestaande uit de modellen RB8 PRO en RB8 MAX, zet de innovatieve traditie van NuStep voort, alsmede haar missie om inclusieve trainingsapparatuur te ontwikkelen waar gebruikers van vrijwel alle fitnessniveaus en functionele vaardigheden hun voordeel mee kunnen doen.

Lees deze handleiding - inclusief alle veiligheidsinformatie - zorgvuldig door voordat u de RB8-trainingsfiets in gebruik neemt.

Veiligheidsinstructies

	 LET OP	 WAARSCHUWING
Dit is het veiligheidssymbool. Het wordt gebruikt om te wijzen op instructies die betrekking hebben op persoonlijke veiligheid. Lees en volg alle veiligheidsrelevante informatie die na dit symbool wordt gegeven om mogelijk (dodelijk) letsel door misbruik te voorkomen.	LET OP duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel. Deze aanwijzing kan ook worden gebruikt om te waarschuwen tegen onveilige praktijken.	WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

 WAARSCHUWING
Verander dit toestel niet zonder toestemming van de fabrikant. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doeleinde, zoals in deze handleiding wordt beschreven. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Houd het product uit de buurt van hitte, vonken, open vuur en hete oppervlakken. Laat nooit een voorwerp in een opening vallen en steek geen voorwerpen in openingen. Niet buitenshuis gebruiken. Lichamelijk letsel kan ontstaan door onjuiste of overmatige training. Hartslagbewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Te sterke lichamelijke inspanning kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Stop direct met trainen als u zich niet lekker voelt. Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot een onjuiste werking. Draagbare RF-communicatieapparatuur (waaronder randapparatuur, zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij 30 cm bij enig deel van dit product, waaronder de kabels, worden gebruikt. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur verslechteren.

Veiligheidsinstructies



LET OP

Raadpleeg uw arts voordat u met een trainingsprogramma begint.

Toezicht is vereist als u gehandicapt bent of een medische aandoening hebt.

Stop met trainen als u zich zwak of duizelig voelt en raadpleeg een arts of win medisch advies in.

Gebruik dit product alleen zoals voorgeschreven door uw arts als u een hartaandoening, hoge bloeddruk, diabetes, ademhalings- of een ander medisch probleem hebt of als u zwanger bent.

Personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of cognitieve vermogens - of met een gebrek aan ervaring met en kennis van dit product - mogen dit product gebruiken, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Draag altijd schoenen en passende kleding als u traint.

Raak het product niet aan en houd het niet vast als uw huid beschadigd is.

Gebruik dit product niet als het beschadigd lijkt of niet kan worden bediend. Controleer het product regelmatig op schade en slijtage. Zorg ervoor dat defecte onderdelen onmiddellijk door gekwalificeerde onderhoudstechnici worden vervangen.

Onderhoud of repareer het product niet tijdens gebruik. Onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



LET OP

Zorg dat de stand van de stoel en bovenarmen goed op uw lichaam is ingesteld.

Strek uw arm niet te ver uit tijdens het gebruik van dit product.

Geef kinderen geen toestemming om dit product te gebruiken.

Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van kinderen en/of huisdieren.

Houd kinderen onder de 13 jaar uit de buurt van dit apparaat.

De weergegeven hartfrequentie, het aantal watt, de MET's en de calorieën zijn niet geschikt voor gebruik in toepassingen waarbij de gezondheid en veiligheid van de patiënt afhankelijk zijn van de juistheid van die parameters.

Het maximale gebruikersgewicht:

RB8_{PRO} model = 227 kg

RB8_{MAX} model = 272 kg

Til dit product niet zelf op. De RB8 is zeer zwaar: 109 kg.

Vraag altijd iemand anders om u te helpen bij het verplaatsen van dit product om lichamelijk letsel en beschadiging van het product te voorkomen. Gebruik de juiste tiltechnieken.

Om letsel te voorkomen, mag u uw handen niet in de ruimtes in of tussen de beschermkappen steken.

Plaats dit product op een vlakke, stabiele ondergrond om een veilig gebruik te garanderen. Pas, indien nodig, de stelpoten aan.

Dit product is uitsluitend bedoeld om via de bijgeleverde wisselstroomadapter op het lichtnet aan te sluiten.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Installatie en opstelling

Uitpakken en installeren

Haal de RB8 voorzichtig uit de verpakking en zet het product op de plaats waar u deze in gebruik wilt nemen. De RB8 is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Voor extra stabiliteit en bescherming van de vloer dient u de trainingsfiets op een vloermat voor trainingsapparatuur te plaatsen, zoals de vloermat die wordt verkocht door NuStep, LLC.

Plaats de RB8 op een vlakke, stabiele ondergrond om een veilig en effectief gebruik te garanderen. Pas, indien nodig, de stelpoten aan.

De minimaal vereiste vrije ruimte rond de RB8 is 61 cm. Extra speling is noodzakelijk als de gebruiker vanuit een rolstoel op het toestel wil gaan zitten.


**LET OP**

De RB8 is erg zwaar. Hij weegt 109 kg.

Vraag altijd iemand anders om u te helpen bij het verplaatsen van dit product om lichamelijk letsel en beschadiging van het product te vermijden.

Gebruik de juiste tiltechniek.

 Als er een klikkend geluid uit de onderkant van de machine komt (tijdens gebruik), controleer dan of de stelpoten goed zijn afgesteld.

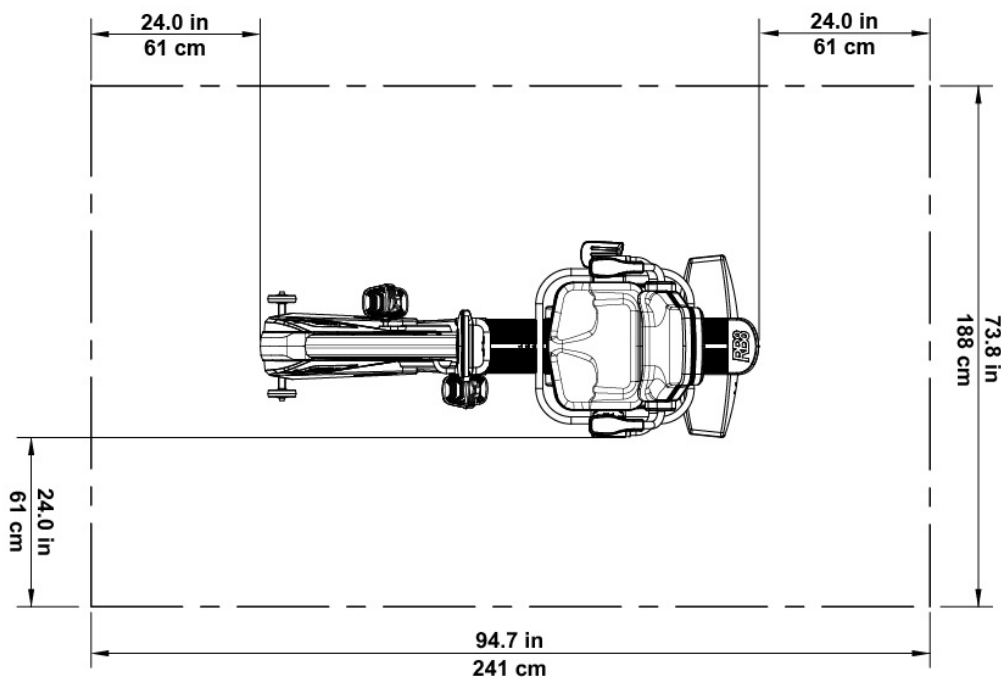

Gebruik van de wisselstroomadapter


De RB8 wordt gevoed door een wisselstroomadapter die bij de eenheid wordt geleverd.

De wisselstroomadapter kan zowel in de voorste als de achterste aansluiting worden gestoken.*
Steek de adapter in een geschikt stopcontact.


Leid het netsnoer van de wisselstroomadapter zodanig naar het stopcontact dat struikelgevaar en schade aan de adapter worden voorkomen. Vermijd druk of spanning op adapterkabels, aansluitingen of stekkers.

Voor de specificaties van de adapter, verwijzen wij u naar het hoofdstuk met *technische gegevens* in deze handleiding.

**Sluit de RB8 niet tegelijkertijd op twee wisselstroomadapters aan.*

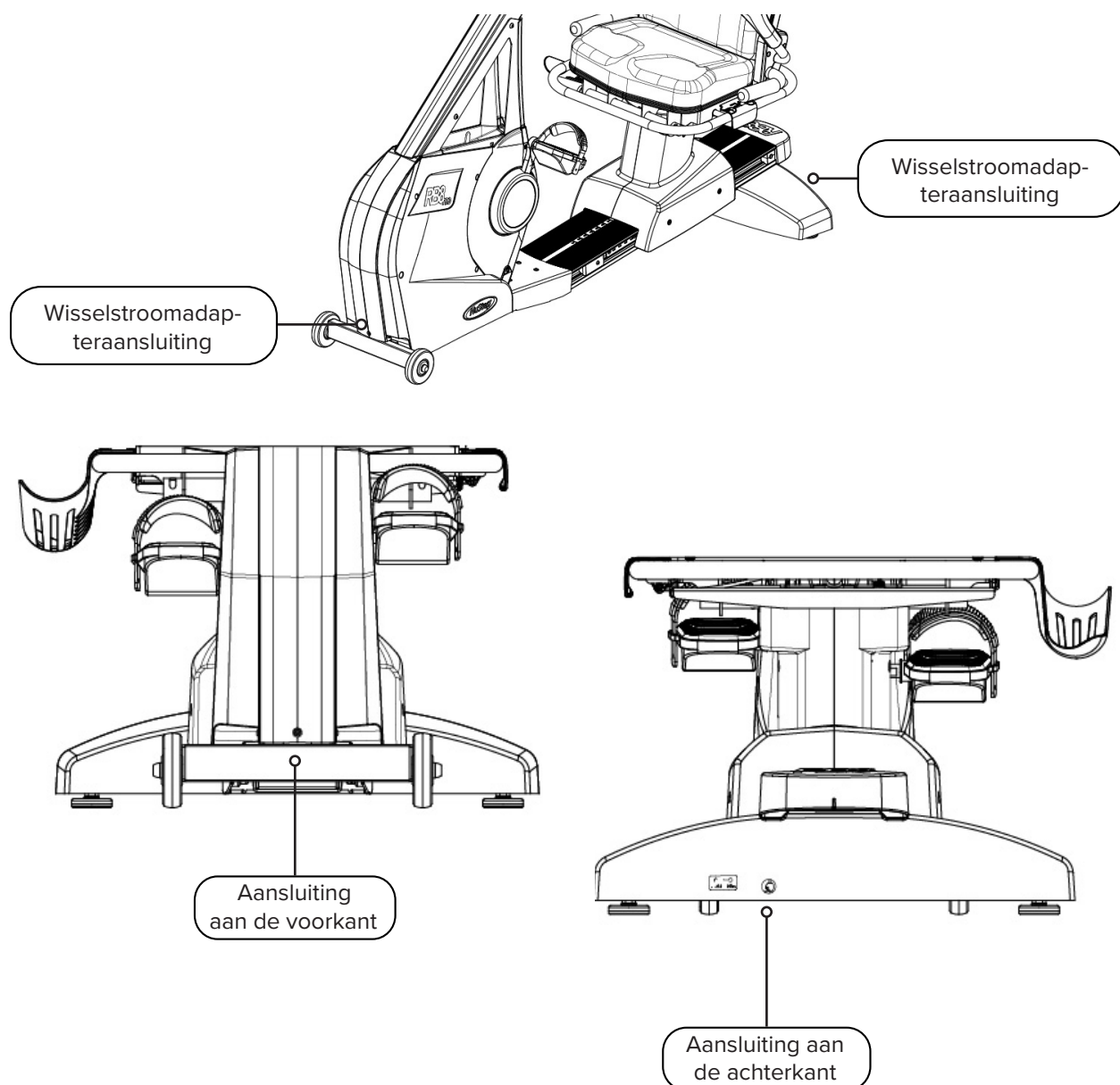

Overzicht van de functies van de RB8

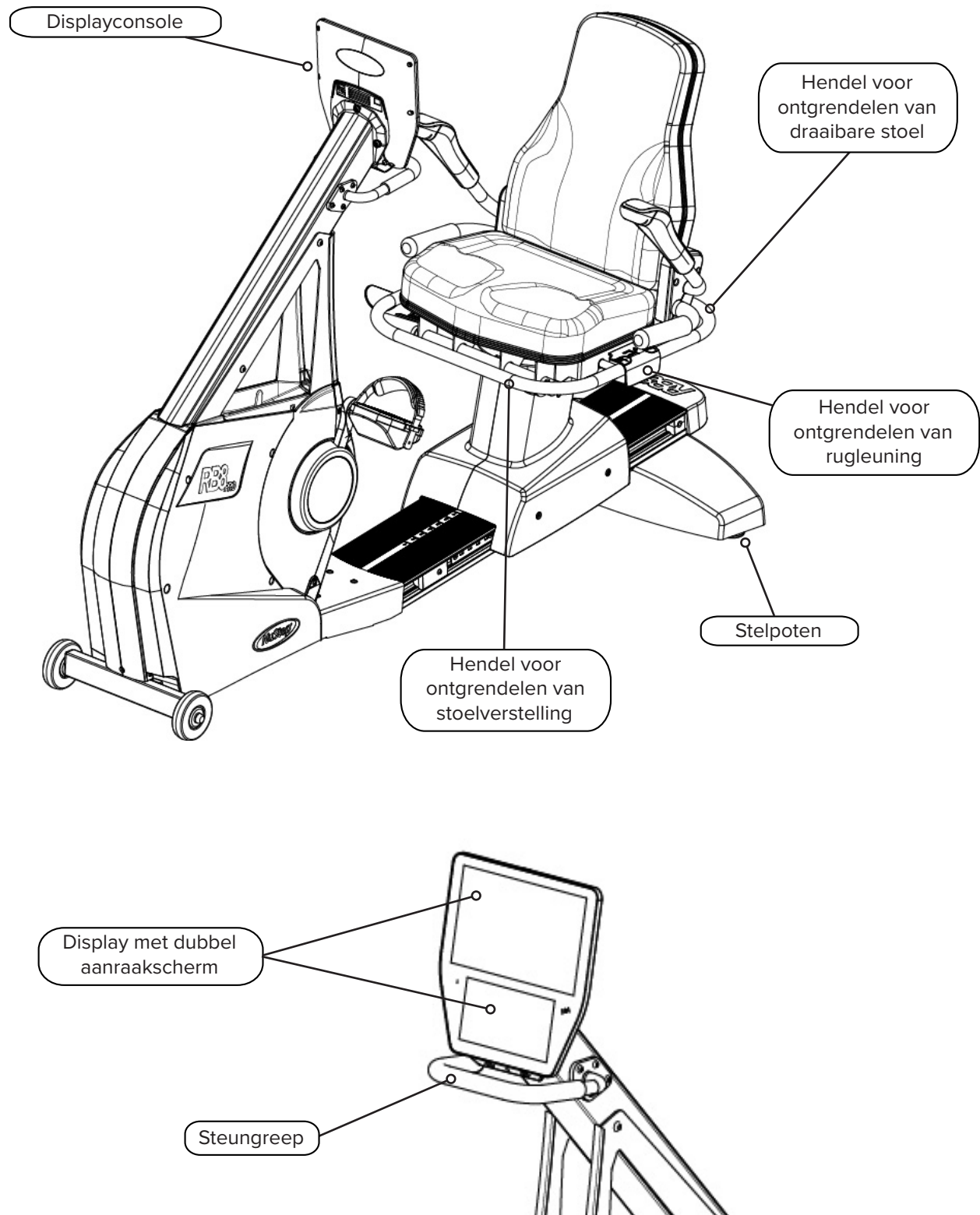

Juiste oefenposities

De lichaamshouding van de gebruiker en de fysieke configuratie van het toestel zijn afhankelijk van de doelen of behoeften van de gebruiker.

Gebruik de informatie die hier wordt gegeven als algemene handleiding of als uitgangspunt voor de opstelling en positionering. Een correcte plaatsing van de zitafstand helpt gebruikers een juiste lichaamshouding aan te houden tijdens het trainen.



LET OP

Lichamelijk letsel kan ontstaan door onjuist of overmatig gebruik.

Zorg ervoor dat de stoel in een juiste biomechanische positie staat.

Overstrek uw benen niet.

Aanpassingen aanbrengen

Draaistoel bedienen

1. Plaats uw voeten stevig op de rail of vloer.
2. Til de achterste ontgrendelingshendel omhoog om de stoel te ontgrendelen.
3. Draai de stoel in een van beide richtingen (stoel is 360° draaibaar en vergrendelt om de 45°).
4. Laat de hendel los om de stoel in de juiste stand te vergrendelen.



De stoel kan worden gedraaid met of zonder een gebruiker op de machine. Voor de veiligheid moet de stoel naar voren gericht zijn om de afstand aan te passen.



Trek de achterste hendel omhoog om de stoel te ontgrendelen.



Draai de stoel in een van beide richtingen. Laat de hendel los om de stoel vast te zetten.

Aanpassingen aanbrengen

Zitafstand aanpassen

1. Plaats uw voeten stevig op de rail of vloer.
2. Til de voorste hendel op om te ontgrendelen.
3. Gebruik de voeten om de stoel naar voren of achteren te schuiven om de afstand tot de armkrukken aan te passen.
4. Laat de hendel los om de stoel vast te zetten.

 Plaats de stoel zodanig dat er een lichte buiging in de knie ontstaat wanneer dat been gestrekt is.



Til de voorste hendel op om de afstand aan te passen.



De knie is licht gebogen wanneer het been volledig is gestrekt.

Stand van de rugleuning aanpassen

1. Plaats uw voeten stevig op de rail of vloer.
2. Til de zwarte hendel aan de linkerkant van de stoel op om te ontgrendelen.
3. Duw op de rugleuning van de stoel om de rugleuning te verstellen (de rugleuning kan tot een hoek van 12° worden aangepast).
4. Laat de hendel los om de stoel vast te zetten.



Til de hendel aan de linkerkant op om te ontgrendelen.



Duw op de rugleuning om de helling aan te passen. Laat de hendel los om te vergrendelen.

Beeldschermen


Console van de RB8

De console heeft twee beeldschermen met touchscreen-navigatie. Het bovenste scherm is het scherm *Start*, het onderste scherm is het scherm *Waarden*.

Het scherm Start

Hier staan de trainings-apps *Snel starten*, *NuStep-grafieken*, *Trainingspartner*, *Gebalanceerd vermogen*, *Hardlopen op paden* en de *NuStep-programma's*.


Elke app wordt aangegeven met een pictogram. Tik op een pictogram om de app te starten.

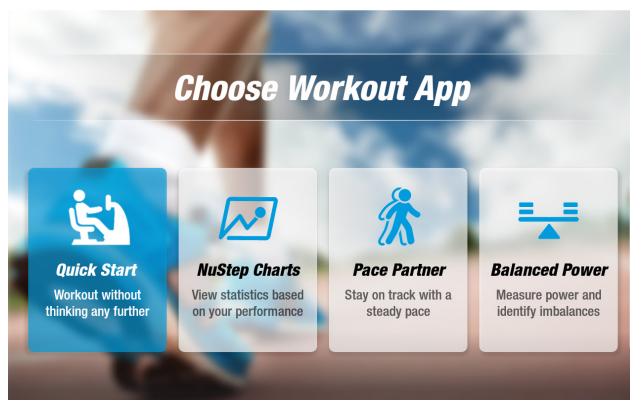

Als u andere apps wilt weergeven, veegt u naar links op het scherm *Start*.

Het scherm Waarden

Hier vindt u informatie en instellingspictogrammen, en trainingswaarden zoals *Tijd*, *Niveau (weerstand)*, *Calorieën*, *SPM (stappen per minuut)*, *MET's*, *Kilometers* en *Totaal aantal stappen*.

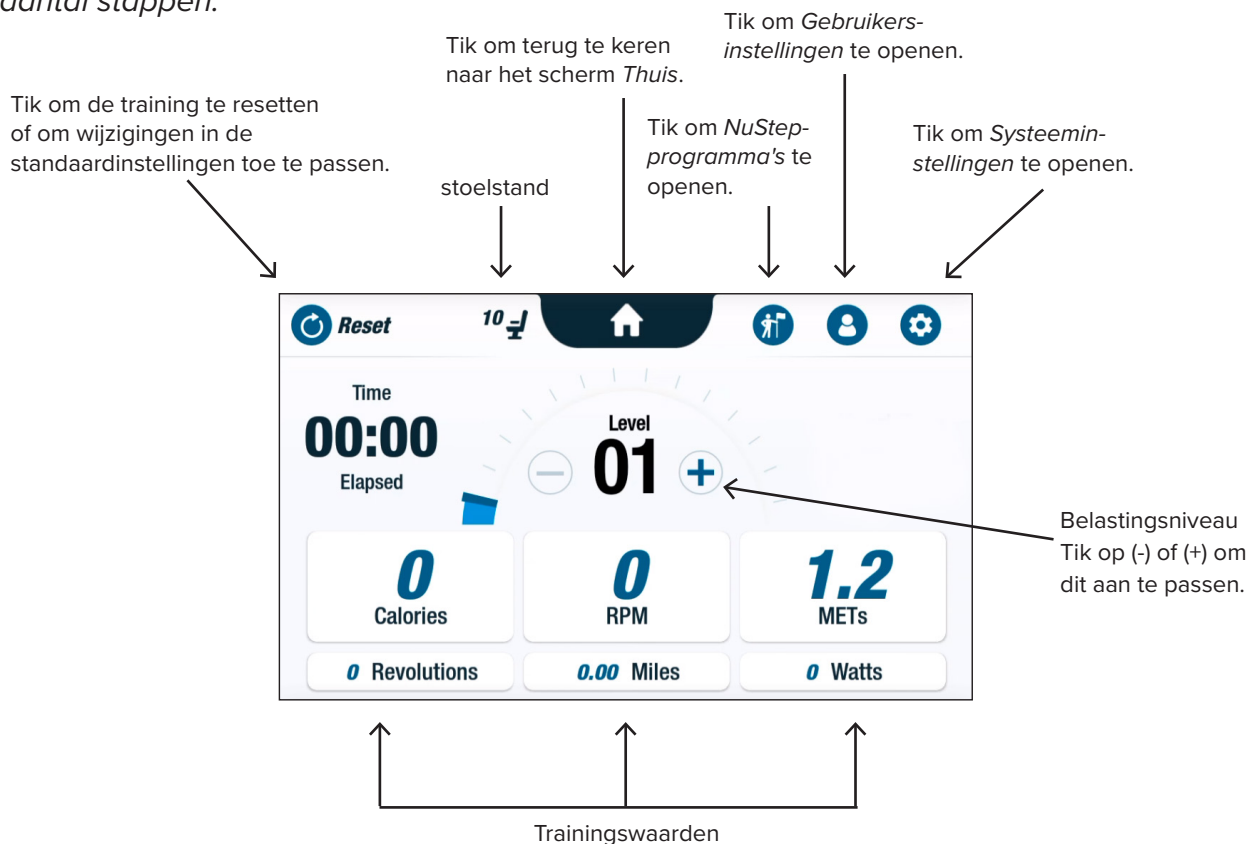

Beeldschermen

App-schermen




Snel starten

Hier kunnen gebruikers trainen zonder tempodoelen in te stellen of meetwaarden te selecteren. *Snel starten* houdt de verstreken tijd en het totaal aantal ronden bij.

Gebruikers kunnen naar andere apps overschakelen vanuit het scherm *Snel starten*. Van app wisselen:

- Tik op [See Your Chart →](#) om de app *Prestatiegrafieken* te openen.
- Tik op [Keep Your Pace →](#) om de app *Trainingspartner* te openen.

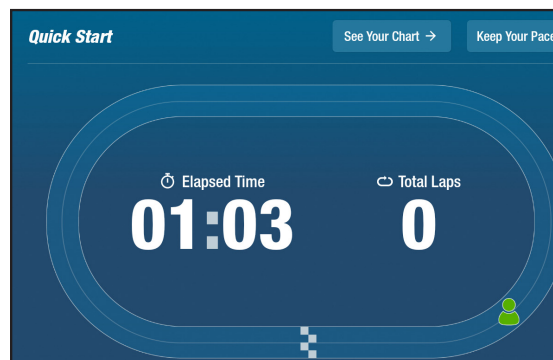

NuStep-grafieken

Geeft prestatiegegevens weer - *Tempo (RPM)*, *Watt*, *Belasting*, *MET's* of *Balans* - die tijdens een training zijn bijgehouden.

Schakelen tussen prestatiegrafieken:

- Tik op het gewenste tabblad met meetwaarden om te selecteren, bijvoorbeeld *Balans*.
- De geselecteerde meetwaarden worden blauw gemarkeerd en de bijbehorende grafiek wordt weergegeven.

Prestatiewaarden



Beeldschermen

Trainingspartner



Gebruikers stellen een doeltempo en trainingswaarden in (*RPM*, *Watt* of *MET's*). Het doel van de gebruiker is om gelijke tred te houden met de partner.

Doeltempo instellen:

1. Tik op  **Set Your Target** om het scherm *Uw doeltempo* te openen.
2. Tik en verplaats de schuifregelaar om het doeltempo in te stellen.
3. Tik op de gewenste waarde, bijvoorbeeld *RPM* om deze te selecteren.
4. Tik op *Bevestigen* om uw keuze te voltooien.

Zodra de gebruiker begint te fietsen, worden op het scherm het huidige tempo en het doeltempo weergegeven.



- Als het tempo overeenkomt, is de fietser van de gebruiker groen en staat deze naast de doelfietser (zie *rechtsboven*).
- Als de fietser niet in het juiste tempo rijdt, is deze oranje en verschijnt deze voor of achter zijn doel (zie *onderstaande schermen*).
- Met de pijlen omhoog of omlaag (*niet afgebeeld*) kan de gebruiker sneller of langzamer gaan om weer op het juiste tempo te komen.

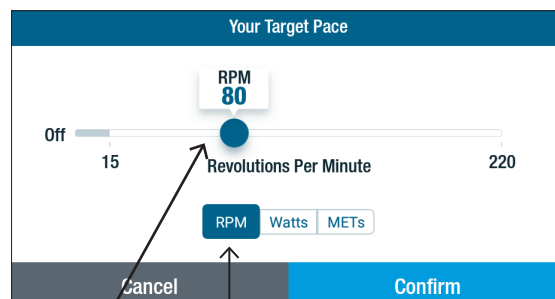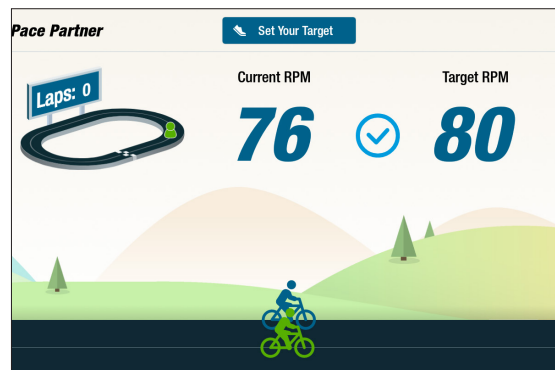

Tik en beweeg om het tempo in te stellen.

Tik om de trainingswaarde te selecteren.

Tik om de selectie te bevestigen.

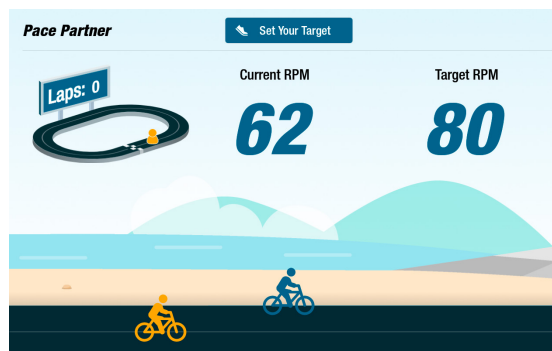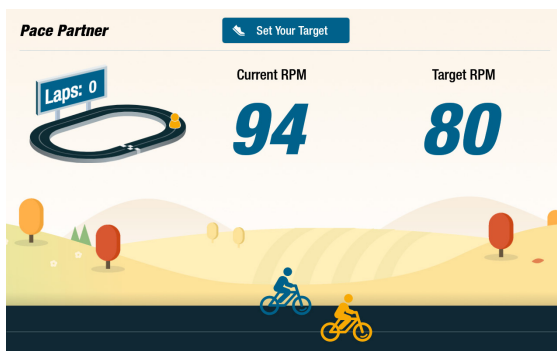

Beeldschermen

Gebalanceerd vermogen

Meet het individuele vermogen (*Watt*) van het rechter- en linkerbeen. Identificeert de relatieve balans, zowel in real-time als tijdens de gehele trainingssessie.

Indien geselecteerd, blijft het *Gebalanceerd vermogen* -programma op de achtergrond draaien om prestatiegegevens te verzamelen, zelfs terwijl de gebruiker in andere apps traint.

Prestatiegegevens worden op twee manieren weergegeven: *Standaard* en *Geavanceerd*.

Standaard

Staafdiagrammen tonen het huidige (real-time) vermogen dat door elk been wordt gegenereerd en de relatieve symmetrie ervan. →

De lijngrafiek toont het percentage balans tussen het linker- en rechterbeen gedurende de sessie. →

In de schermen rechts laat het bovenste scherm zien dat de vermogensafgifte tussen het rechter- en linkerbeen in balans is.

Het onderste scherm laat zien dat de vermogensafgifte van het linkerbeen groter is dan die van het rechterbeen, en daarom uit balans is.

 Om gebalanceerd te zijn, mag het verschil in vermogen tussen de benen niet groter zijn dan 10%.


Geavanceerd

Ook hier worden de staafdiagrammen en lijngrafiek gebruikt om de prestaties weer te geven.


Er zijn afbeeldingen om de radiale kracht te tonen die door elk been wordt gegenereerd. →

Zo ziet u waar krachtenbalans optreedt tijdens rotatie.


Gebalanceerd

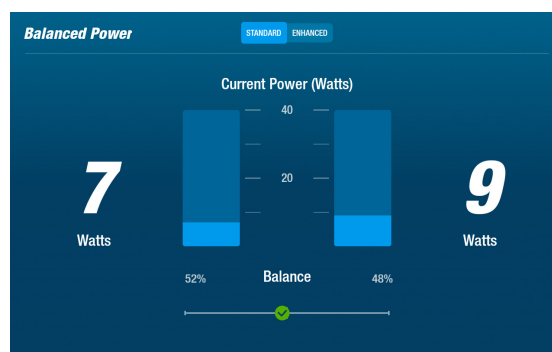

Niet gebalanceerd

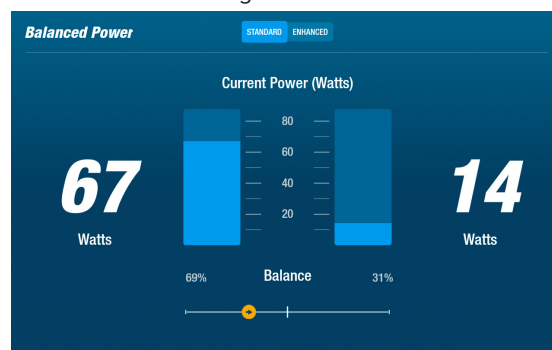

Tik om te schakelen tussen *Standaard* en *Geavanceerd*.

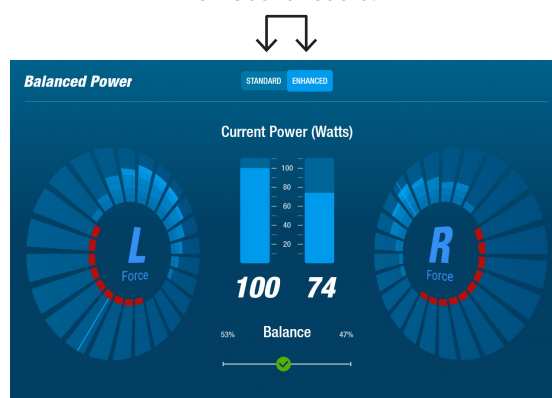

Beeldschermen




Hardlopen op paden

Speelt video's af van mooie fietsroutes om gebruikers te stimuleren om te trainen. Zo begint u:

1. Tik op de afbeelding op het scherm om de gewenste video te selecteren, bijvoorbeeld *Rijden in de canyon van Utah*.
2. Fiets met uw benen om de video af te spelen.

Ga als volgt te werk als u wilt terugkeren naar het menu *Hardlopen op paden*:

1. Tik op het scherm. De titelbalk rolt naar beneden.
2. Tik op de 'pijl terug' op de titelbalk.

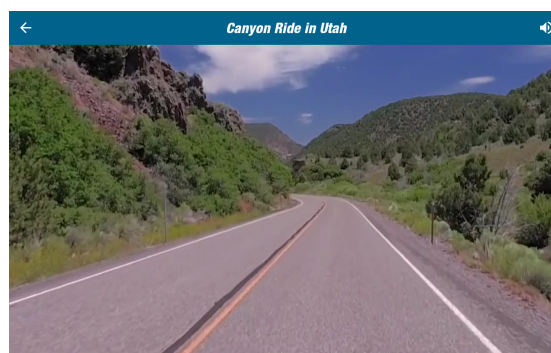

Alle video, audio en andere inhoud die in Hardlopen op paden en andere NuStep-apps is opgenomen, is beschermd volgens Amerikaanse en internationale auteurswetten. Er wordt geen recht verleend om de video, audio of andere inhoud te gebruiken op een andere wijze dan als presentatie in NuStep-producten.




NuStep-programma's

Gebruikers selecteren trainingsprogramma's die zijn gericht op een specifiek doel (*SPM, Watt, MET's en Heuvels*), en stellen een doel en duur in. Open vanuit het scherm *Start* (linksonder) of het scherm *Waarden* (rechtsonder).



- of -

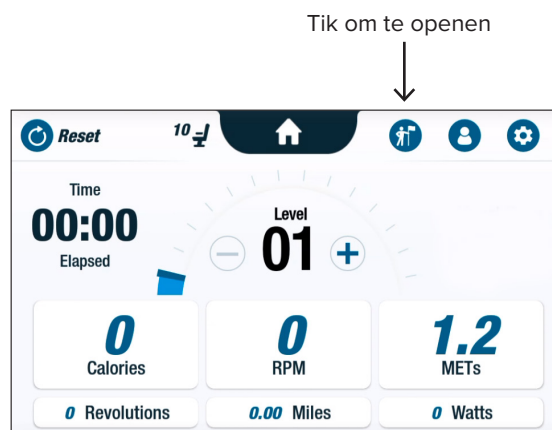

De instelling voor elk programma volgt dezelfde stappen (zie volgende pagina): 1. Selecteer programma in menu; 2. Instellingen bewerken (*Doel en Duur*); 3. Start programma.

Beeldschermen




Watt

Gebruikers stellen een beoogd niveau en een beoogde duur (*minuten, afstand of geen*) voor hun training in.

Openen:

1. Ga naar het menuscherm *Programma's* van NuStep.
2. Tik op het pictogram *Watt*  om het instellingenscherf te openen.
3. Tik op het pictogram *Doel bewerken*  om het instellingenscherf te openen.
 - a. Gebruik de schuifregelaar of tik op (-) (+) om het Watt-niveau in te stellen.
 - b. Tik op *Doel instellen* om de instelling te bevestigen.
4. Tik op het pictogram *Duur bewerken* om het instellingenscherf te openen.
 - a. Herhaal stap a. en b.
5. Tik op *Programma starten* om het programma uit te voeren.


Het scherm Programmamenu

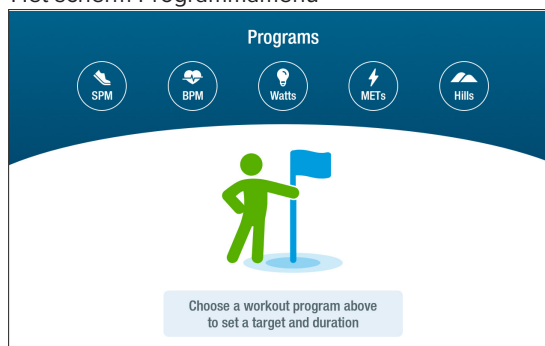


Het scherm Instellingen



Het scherm Watt instellen

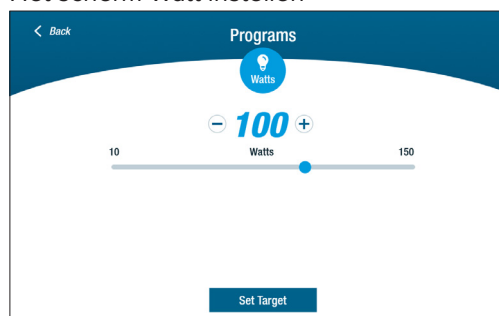

Het scherm Duur instellen

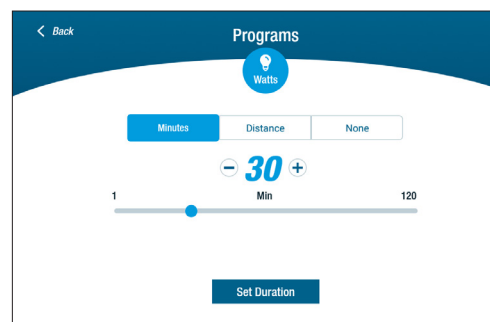


Het scherm dat aangeeft dat een programma wordt uitgevoerd



Pauzefunctie

De RB8 heeft een functie die de console na 3 minuten uitschakelt. Als een gebruiker stopt met fietsen en dit niet binnen drie minuten hervat, wordt de console gereset.

Voordat de console wordt uitgeschakeld, kan de gebruiker de pauze (bijvoorbeeld voor intervaltraining niet op de fiets) met nog eens 15 minuten verlengen. In de pauzemodus kan de gebruiker ook een samenvatting van zijn trainingsprestaties bekijken of zijn trainingssessie beëindigen.

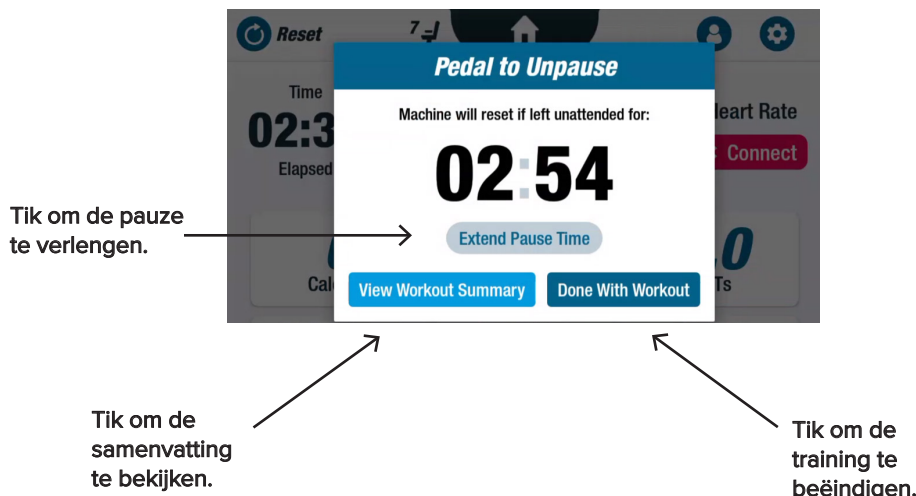

Na het bekijken van het overzicht kunnen gebruikers terugkeren naar hun training, de training beëindigen of het trainingsoverzicht exporteren naar een USB-stick (zie pagina 20 voor instructies).




Systeeminstellingen

Gebruik Systeeminstellingen om het volume en de helderheid van het scherm aan te passen, standaardinstellingen te wijzigen, diagnostische gegevens te bekijken, de configuratie van de metrische gegevens te wijzigen, en om informatie over regelgeving en software te bekijken.

Ga om te openen naar het scherm *Waarden* en tik op het pictogram .

Gebruik de schuifregelaars om het volume van de console of de helderheid van het scherm aan te passen.

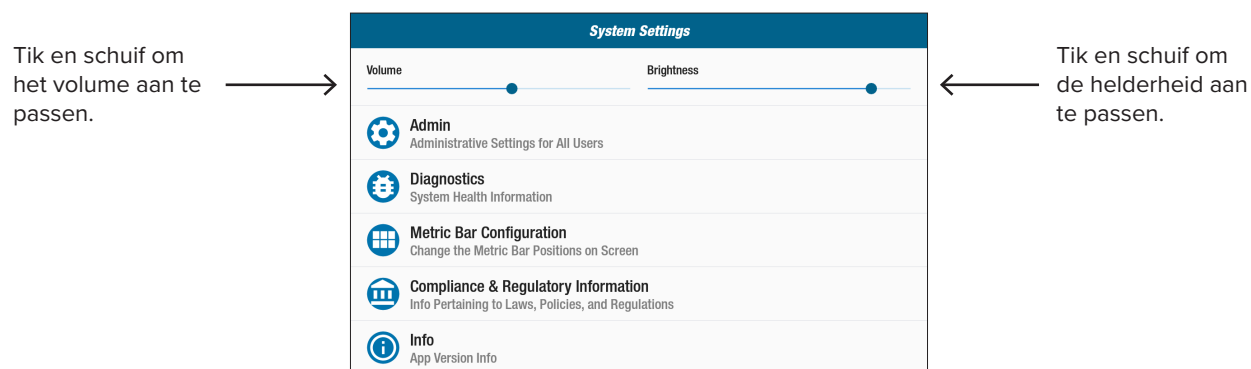


Beheer

Vereist een wachtwoord* om toegang te krijgen. Gebruik dit om de standaardinstellingen (*leeftijd, gewicht, geslacht*) te wijzigen. De standaardinstellingen gelden algemeen, d.w.z. eenmaal ingesteld, zijn ze voor elke gebruiker hetzelfde.

Het beheerscherm openen:

1. Tik op het pictogram .
2. Tik op het scherm om het numerieke toetsenbord te openen.
3. Voer wachtwoord in, tik op *Verzenden*.
4. Tik op het pictogram  om het toetsenbord te sluiten.

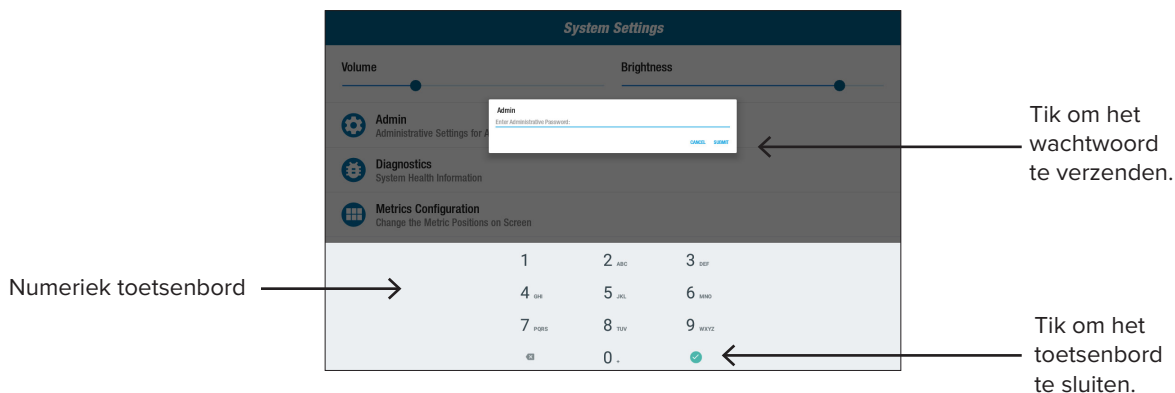

*Het wachtwoord is het serienummer van het apparaat in omgekeerde volgorde. Als het serienummer van de eenheid bijvoorbeeld 1234567 is, is het wachtwoord 7654321. Het label met het serienummer bevindt zich op de afdekking aan de achterkant.


Systeeminstellingen

Configuratie van metrische balken

Gebruikers kunnen wijzigen welke meetgegevens (*Mijlen, Stappen, SPM, MET's, Calorieën of Watt*) er worden weergegeven in het scherm met waarden. De bovenste rij toont de huidige configuratie voor meeteenheden.

Zo wijzigt u dit:


1. Tik op  het pictogram om het scherm *Waarden configureren* te openen.
2. Tik op een huidige meeteenheid om deze te markeren.
3. Tik om een andere meeteenheid voor de gemarkeerde positie te kiezen.
4. Tik op *Bevestigen* om de wijziging toe te passen.

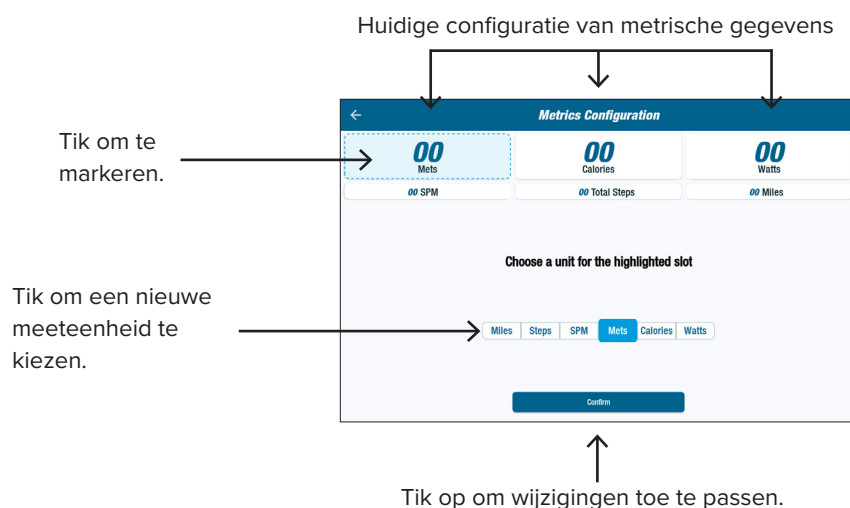

Gebruikersinstellingen

Gebruikers maken een profiel met hun eigen leeftijd, gewicht en geslacht. Ga naar het scherm *Waarden* om er een te maken:

1. Tik op het pictogram  om het scherm *Gebruikersinstellingen* te openen.
2. Tik in elk veld om leeftijd en gewicht in te voeren; selecteer geslacht.
3. Steek om de instellingen op te slaan een USB-stick in de USB-poort (zie afbeelding op de volgende pagina).
4. Tik op *Exporteren naar USB*.
5. Om terug te keren naar het startscherm, tikt u op het pictogram Start  in het scherm *Waarden*.

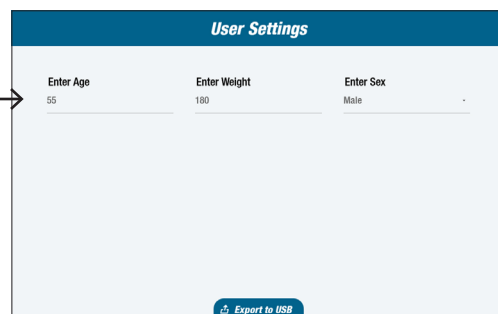

Tik om te exporteren.

Gegevens uit een gebruikersprofiel exporteren

Gebruikers kunnen op elk moment hun profielgegevens exporteren naar een USB-stick.

Zo kunt u exporteren:



1. Steek het USB-station in de USB-poort aan de achterkant van de console.
2. Tik op het pictogram  in het scherm *Waarden* om het scherm *Gebruikersinstellingen* te openen.

Sla deze stap over als het profielscherm automatisch wordt gestart.

3. Tik op het tabblad *Exporteren naar USB* onderaan het scherm.
4. Verwijder de USB-stick.



Tik op pictogram om *Gebruikersinstellingen* te openen.

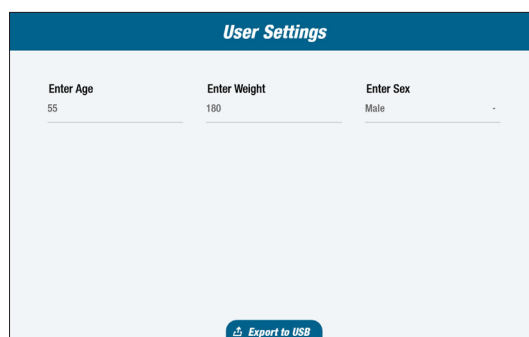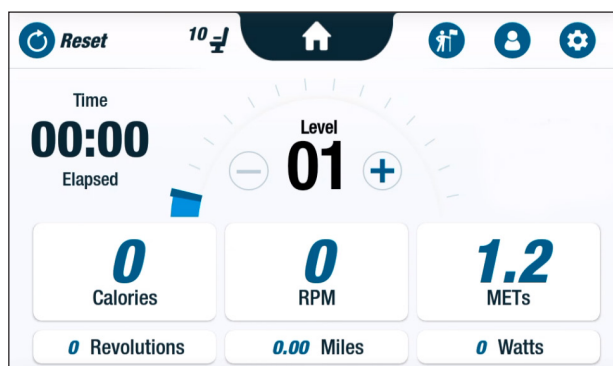

Tik om profielgegevens te exporteren.

Trainingssamenvatting exporteren

Gebruikers kunnen hun trainingsoverzicht exporteren naar een USB-stick. De samenvatting wordt opgeslagen in PDF-indeling.


 Plaats een USB-station in de USB-poort voordat u gaat trainen om te kunnen exporteren.

Aan het einde van een training (en wanneer de gebruiker 3 minuten is gestopt met fietsen) wordt het scherm *Fietsen om pauze te beëindigen* geopend.

1. Tik op *Trainingsoverzicht weergeven* om het overzichtsscherm te openen.

 Tik niet op *Klaar met training* omdat u hiermee de sessie beëindigt en het apparaat reset. De samenvatting van de gegevens zijn dan niet langer beschikbaar.

Tik om de samenvatting te openen

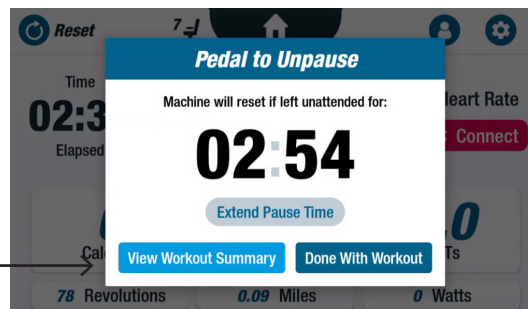

2. Tik op een waarde, bijvoorbeeld *Tempo*, om de samenvatting weer te geven. Tik in het scherm *Trainingsoverzicht* op *Exporteren naar USB*.

Tik om de samenvatting te bekijken.



Tik om profielgegevens te exporteren.

Preventief onderhoud

Intervallen voor preventief onderhoud

De RB8 is een kwalitatief hoogwaardig apparaat met een lange levensduur, ontworpen voor commercieel gebruik. Er worden enkele taken aanbevolen om een veilige werking te garanderen en de nuttige levensduur van het product zo lang mogelijk te maken. Volg de aanbevolen intervallen voor preventief onderhoud overeenkomstig de gebruiksfrequentie van uw product. Dit zijn geschatte intervallen en u moet wellicht de periode tussen de preventieve onderhoudswerkzaamheden vergroten of verkleinen afhankelijk van het werkelijke gebruik.

ONDERDEEL	WERKZAAMHEDEN	FREQUENTIE
Armen, handvaten en grepen	* Reinigen	Wekelijks
Console	* Reinigen	Wekelijks
Beschermkappen en frame	* Reinigen	Wekelijks
Stoel	* Reinigen	Wekelijks
Wisselstroomadapter	Inspecteer op tekenen van slijtage of schade	Wekelijks
*Gebruik een niet-schurend reinigingsspuitmiddel en een zachte doek om de RB8 te reinigen. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.		

Garantie van de RB8

Om uw garantie te bekijken of af te drukken, gaat u naar: www.nustep.com

Bij vragen over uw garantie verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice op:

E-mail: support@nustep.com

Tel.: +1 800-322-2209 (VS) of +1 734-769-3939




Voor klanten buiten de VS en Canada geldt: neem contact op met uw plaatselijke NuStep-distributeur voor hulp.

Informatie over serienummer van de RB8

Plaats op het product:

Het label met het serienummer bevindt zich aan de rechterzijde van het achterste afdekking.

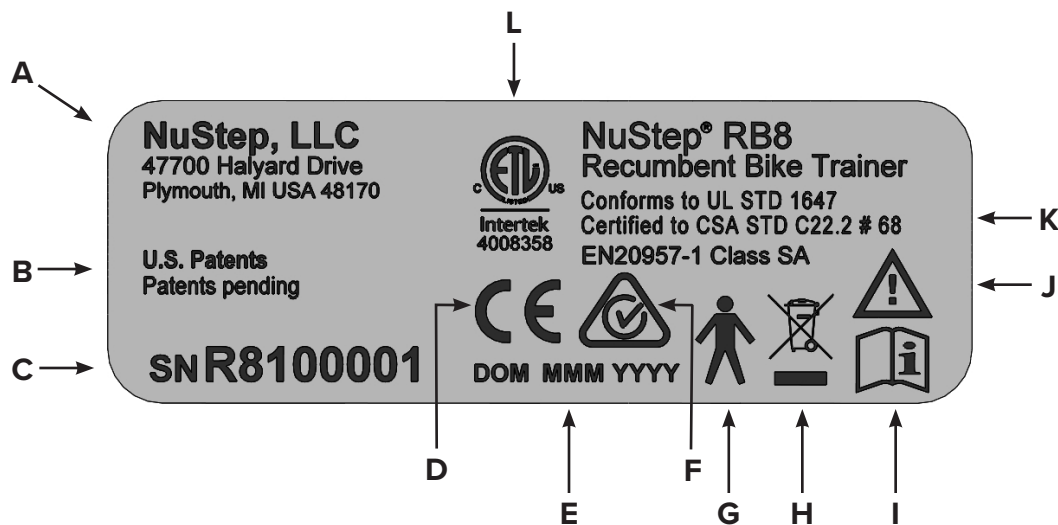

A	Naam en adres van fabrikant
B	Internationale octrooibescherming voor het product
C	Model en serienummer
D	CE-markering
E	Productiedatum
F	RCM
G	Toegepast onderdeel van type BF voor elektrische veiligheid
H	Markering WEEE-richtlijn
I	Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding
J	Let op! Lees de bijgevoegde documentatie
K	Naleving van normen
L	Markering van Amerikaans erkend testlaboratorium

Wat er op het label staat, is afhankelijk van het NuStep-model.

Klantenservice

Neem voor hulp met uw RB8-apparaat contact op met de NuStep-klantenservice.

Vermeld het serienummer van het apparaat (rechts op de achterste afdekking) en geef een volledige beschrijving van het probleem, zodat onze productspecialisten u beter kunnen helpen.

Neem contact op met een NuStep-productspecialist:

E-mail: support@nustep.com


Tel.: +1 800-322-2209 (VS)
+1 734-769-3939

Web: nustep.com



Voor klanten buiten de VS en Canada geldt: neem contact op met uw plaatselijke NuStep-distributeur voor klantenservice.

Technische gegevens

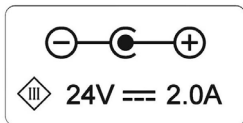Maximumgewicht van de gebruiker	Model RB8PRO: 227 kg Model RB8MAX: 272 kg
Lengte van gebruiker	137 cm – 200 cm
Gewicht van de apparatuur	109 kg
Afmetingen (lengte/hoogte/breedte)	188 cm lang; 82 cm breed
USB-A-poort	De USB-poort is alleen geschikt voor flashdrives. Sommige flashdrives zijn mogelijk niet compatibel met de USB-poort van de RB8. Sluit geen externe apparaten met een USB-kabel op deze poort aan.
USB-C-poort	Aansluiting alleen voor servicedoeleinden.
Ethernet-poort	Aansluiting alleen voor lokaal netwerk. Verbind de RB8 niet met internet. Bevestig bij het aansluiten van een Ethernet-kabel op het product een scharnierend Laird-ferriet (onderdeelnummer 28A2025-OA0 van de fabrikant) op de kabel tussen 10 en 30 cm van de consoleaansluiting. Het Laird-ferriet kan worden vervangen door een andere ferriet met gelijkwaardige technische specificaties.
Normen	UL 1647, CSA C22.2#68, EN 20957-1
Remsysteem en fietsbewegingen	De RB8 heeft een snelheidsonafhankelijk remweerstandssysteem.
Wisselstroomadapter	De RB8 mag alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voeding. Model GlobTek TR9KI3750CCP-IM(R6B) Klasse 2 Uitgangsclassificatie: 24 Vdc 3,75A, 90W Ingangsclassificatie: 100 - 240 VAC ~ 50 - 60 Hz 1,5A  De RB8 mag alleen worden gevoed met een extra lage veiligheidsspanning die overeenkomt met de markering op het product.
Specificaties van omgevingscondities voor transport, opslag en gebruik	Transport en opslag: -10 tot 50 graden Celsius < 95% niet-condenserende vochtigheid 20 tot 107 kPa Te gebruiken: - tussen 5 tot 35 graden Celsius < 85% niet-condenserende vochtigheid; 60 tot 107 kPa

Conformiteitsverklaring van Amerikaanse communicatiecommissie (FCC)

Conformiteitsverklaring van Amerikaanse communicatiecommissie (FCC):

Opmerking: Uit testen van dit toestel is gebleken dat het voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens Deel 15 van de FCC-regels.

Deze grenswaarden zijn bedoeld om een redelijke bescherming te geven tegen schadelijke storingen in een huis- c.q. wooninstallatie. Dit toestel genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze genereren en kan, indien het niet volgens de installatie-instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storingen van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storingen kunnen optreden. Als het toestel de radio- of tv-ontvangst ernstig stoort, wat kan worden gecontroleerd door dit toestel uit- en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden de storing op een van de volgende manieren te verhelpen:

- Verdraai of verplaats de antenne van het ontvangende apparaat
- Vergroot de scheidingsafstand tussen het toestel en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten
- Vraag de dealer of een ervaren radio/tv-monteur om advies

Handelsmerken

Het Bluetooth®-woordmerk en Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door NuStep, LLC is gelicentieerd. Andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van de betreffende eigenaars.

NuStep, LLC
47700 Halyard Drive
Plymouth, MI 48170
Verenigde Staten
800-322-2209
+1 734-769-3939
www.nustep.com



De informatie in deze handleiding is bij het ter perse gaan zo actueel mogelijk. Omdat wij continu streven naar verbetering, kunnen de specificaties en beschrijvingen zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. Niets uit deze handleiding mag worden veeelvoudigd of worden verzonden, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch of mechanisch en voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NuStep, LLC.

© Copyright mei 2022 by NuStep, LLC.

NuStep® en Transforming Lives® zijn gedeponeerde handelsmerken van NuStep, LLC.

Handleiding, productnummer 22084, gebruikershandleiding voor de RB8, Rev B



22084 (DOC-3714) Ver. 1

Approved By:

[\(CO-220\) RB8 User Manual Updates for OUS Model Variants](#)

Description

The purpose of this change order is to release updated versions of the RB8 user manual and translations of the manual. The OUS model variants do not include heart rate monitoring. References to the HR functionality will be removed for the new manual version.

Justification

Administrative change to support OUS distribution of RB8 product.

Assigned To:	Initiated By:	Priority:	Impact:
Kevin Obrigkeit	Trevor Young	Medium	Minor

Version History:

Author	Effective Date	CO#	Ver.	Status
Trevor Young	April 22, 2025 12:01 PM EDT	CO-220	1	Published
Kevin Obrigkeit	November 27, 2023 4:19 PM EST	CO-79	0	Superseded